


Instrucțiuni de utilizare

**Waterpik®
ION
WP WF11EU CORDLESS ION**

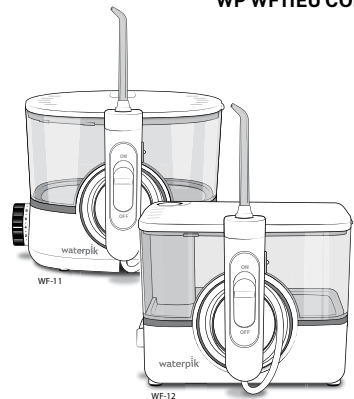

1.1 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Când utilizați produse electrice, în special în prezența copiilor, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază:

ATENȚIE!

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Nu manipulați ștecherul sau încărcătorul cu mâinile ude.
- Nu introduceți încărcătorul în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați acest produs în timp ce faceți baie.
- Nu așezați și nu depozitați acest produs într-un loc de unde poate cădea sau fi tras în cadă sau chiuvetă.
- Nu întindeți mâna după acest produs dacă a căzut în apă. Deconectați imediat de la priză.
- Verificați dacă există deteriorări la cablul de încărcare înainte de prima utilizare și pe durata de viață a produsului.

1.2 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau vătămare corporală:

- Nu conectați acest dispozitiv la un sistem de tensiune diferit de sistemul de tensiune specificat pe dispozitiv sau pe încărcător. Utilizarea cu o tensiune necorespunzătoare va deteriora produsul și va ANULA garanția.
- Dacă produsul este deschis/dezasamblat din ORICE motiv, garanția este ANULATĂ.
- Nu utilizați acest produs dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat pe jos sau dacă a fost scăpat în apă.
- Nu direcționați jetul de apă sub limbă, în ureche, nas sau alte zone delicate. Acest aparat este capabil să producă presiuni care pot provoca daune serioase în aceste zone. Amoeba potențial mortală, Naegleria Fowleri, poate fi prezentă în unele ape de la robinet sau în apa de fântână necolorată și poate fi fatală dacă este direcționată în nas sau urechi.
- Utilizați acest produs doar conform indicațiilor din aceste instrucțiuni sau conform recomandărilor medicului stomatolog.
- Utilizați doar capete și accesorii recomandate de Water Pik, Inc.
- Nu introduceți și nu lăsați să pătrundă obiecte străine în orice deschidere sau furtun.
- Nu apropiați cablul de încărcare și încărcătorul USB furnizat de producător de suprafețe încălzite.

1.3 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați aparatul în aer liber sau în locuri în care se folosesc produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
- Nu utilizați iod, soluție salină sau uleiuri esențiale concentrate insolubile în apă în rezervorul acestui produs. Utilizarea acestora poate reduce performanța produsului și va scurta durata de viață a acestuia. Utilizarea acestor produse va anula garanția.
- Umpleți rezervorul doar cu apă caldută sau cu alte soluții recomandate de medicul stomatolog, având grijă ca ulterior să curățați rezervorul în mod corespunzător, conform instrucțiunilor. În cazul în care acești pași nu sunt respectați, garanția produsului va fi ANULATĂ.
- Îndepărtați orice bijuterie orală sau dentară înainte de utilizarea acestui produs.
- Nu utilizați aparatul dacă aveți o rană deschisă pe limbă sau oriunde altundeva în cavitatea orală.
- Dacă urmați un tratament cu antibiotice, în special antibiotice înainte de proceduri stomatologice, trebuie să consultați stomatologul înainte de a utiliza acest aparat sau orice alt dispozitiv de igienă orală.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu utilizați dușul bucal mai mult de cinci minute la fiecare două ore.

1.4 REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Ca măsură de siguranță, acest ștecher este conceput să se potrivească într-o priză polarizată într-un singur sens. Dacă ștecherul nu intră complet în priză, inversați-l. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu încercați să modificați ștecherul în niciun fel.
 - Nu lăsați flaconul și tabletele de albire la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
 - Tabletele de albire conțin xilitol, care poate fi dăunător animalelor de companie.
- NOTĂ: Unitatea se va opri automat după 5 minute de utilizare continuă.**

NU ARUNCAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

2.1 DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Pornire/Oprire
 2. Mâner
 3. Comutator de apă
 4. Control presiune
 5. Suport magnetic pentru mâner
 6. Articulație furtun mâner
 7. Capăt
 8. Rotator capăt
 9. Capac rezervor
 10. Rezervor
 11. Buton ejectare capăt
 12. Contact de încărcare
 13. Bază
 14. Încărcător USB*
- Cablul de încărcare USB


Cablul de încărcare USB
20030698-1 Alb
20030698-2 Negru
Încărcător USB*
20024470-3 Alb
20024470-4 Negru
*Încărcătorul USB nu este inclus în toate configurațiile produsului.

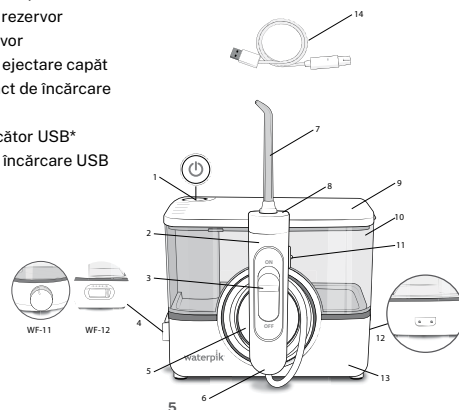

2.1 DESCRIEREA PRODUSULUI

CAPETELE DE UTILIZARE (NU TOATE CAPETELE SUNT INCLUSE LA TOATE MODELELE)


- A. Capătul Ortodontic***
Aparat dentar/Utilizare generală
- B. Capătul Pik Pocket™****
Pungi parodontale/Leziuni de furcație
- C. Capătul Plaque Seeker™ ***
Implanturi/Coroane/Punți/Retenere
- D. Capătul Precision (Classic Jet)****
Utilizare generală
- E. Capătul Implant Denture**
Punți și proteze cu implant fix
- F. Capătul curățător pentru limbă****
Curățarea limbii pentru o respirație proaspătă

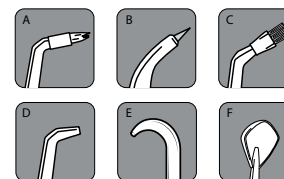

*Înlocuiți la fiecare 3 luni

**Înlocuiți la fiecare 6 luni

3.1 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII

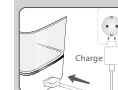

Încărcarea unității înainte de prima utilizare

Dacă nu este furnizat un încărcător USB, este necesar un încărcător USB cu următoarele specificații pentru a încărca acest produs: USB Tip-A, Ieșire Nominală: 5.0 VDC, 1.0 A. Asigurați-vă că contactele de pe cablu și unitate sunt uscate înainte de a conecta încărcătorul. Introduceți încărcătorul USB într-o priză de perete și conectați cablul magnetic al încărcătorului la unitate. Indicatorul de încărcare al unității va lumina în timp ce se încarcă și va începe să clipească intermitent la fiecare 3 secunde când unitatea este complet încărcată. O încărcare completă va dura aproximativ 4 săptămâni când unitatea este utilizată o dată pe zi timp de un minut pe zi. Când bateriile necesită încărcare (aproximativ 30% încărcare rămasă), indicatorul luminos de încărcare va clipi de 3 ori rapid pentru a indica faptul că utilizatorul ar trebui să ia în considerare reîncărcarea unității. O reîncărcare completă va dura 4,5-5 ore. Dacă utilizați dușul bucal o dată pe zi sau mai rar, se recomandă să-l încărcați la fiecare 3-4 săptămâni. Dacă îl folosiți de două ori pe zi sau mai mult, încărcați unitatea mai frecvent.

Pregătirea rezervorului

Îndepărtați rezervorul, ridicați capacul rezervorului și umpleți-l cu apă caldută. Așezați rezervorul la locul său peste bază și apăsați ferm, apoi închideți capacul.

3.2 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII

Inserarea și îndepărtarea capetelor
Introduceți capătul în centrul mânerului dușului bucal, apăsând ferm până când acesta face clic în poziție. Inelul colorat va fi la același nivel cu partea de sus a mânerului dacă vârful este poziționat corect. Pentru a îndepărta capătul din mâner, glisați butonul de ejectare.

Pregătirea unității înainte de prima utilizare
Setați controlul presiunii la cel mai mare nivel (setarea de presiune nr. 10), îndreptați mânerul și capătul spre chiuvetă. Porniți alimentarea și apa până când acestea începe să curgă prin capăt.

Ajustarea setării presiunii
Setați controlul presiunii pe baza unității la cea mai mică setare (setarea de presiune nr. 1) pentru prima utilizare. Creșteți treptat presiunea în timp până la setarea preferată – sau conform instrucțiunilor medicului stomatolog.

Utilizarea dușului bucal
Puneți întotdeauna capătul în cavitatea orală înainte de a porni unitatea. Cu comutatorul de apă de pe mâner în poziția OFF, porniți unitatea. Aplecați-vă deasupra chiuvetei și închideți ușor buzele pentru a preveni stropirea, permițând în același timp apei să curgă din cavitatea orală în chiuvetă.

3.3 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII

Porniți comutatorul de apă. Când terminați, opriți comutatorul de apă și unitatea.

În timpul utilizării, puteți opri fluxul de apă glisând comutatorul de apă de pe mâner în poziția OFF.

NOTĂ: Motorul va continua să funcționeze chiar dacă opriți fluxul de apă de pe mâner.

Pentru cele mai bune rezultate, începeți cu dinții din spate și continuați spre dinții din față. Direcționați jetul la un unghi de 90 de grade față de linia gingivală, cu vârful în cavitatea orală. Glisați vârful de-a lungul liniei gingivale și faceți o pauză scurtă între dinți. Continuați până când ați finalizat de curățat interiorul și exteriorul dinților de sus și de jos.

Timer de un minut/30 de secunde
Jetul de apă va avea o pauză scurtă la fiecare 30 de secunde pentru a vă reaminti să treceți la cealaltă arcadă a gurii și o altă pauză scurtă la 1 minut pentru a semnala că ați ajuns la timpul recomandat de curățare. Aparatul va continua să funcționeze fără pauze până când va fi oprit. În funcție de setarea de presiune, o parte din apă va rămâne în rezervor după 1 minut.

După utilizare
Opriți aparatul. Goliți orice lichid rămas în rezervor.

NOTĂ: Dacă ați folosit apă de gură sau altă soluție în loc de apă, consultați secțiunea „Utilizarea apei de gură și altor soluții”. Nerespectarea instrucțiunilor sau utilizarea soluțiilor necorespunzătoare va atrage automat anularea garanției.

4. ACCESORII

Capătul Pik Pocket™. Este special conceput pentru a distribui apă sau soluții antibacteriene adânc în pungile parodontale. Pentru a folosi capătul Pik Pocket™, setați unitatea la cea mai mică treaptă de presiune. Puneți vârful moale pe un dinte la un unghi de 45 de grade și introduceți-l ușor sub gingie, în punga parodontală.

Capătul pentru curățarea limbii. Setați la cea mai mică presiune, plasați vârful în centrul/mijlocul limbii, la jumătatea distanței spre spate. Trageți încet înainte cu presiune ușoară. Creșteți presiunea după preferință.

Capătul Ortodontic. Pentru a utiliza capătul ortodontic, glisați ușor vârful de-a lungul liniei gingiei, oprindu-vă scurt pentru a peria ușor zona dintre dinți și în jurul bracketului ortodontic, înainte de a trece la următorul dinte.

Capătul Implant Denture. Este conceput special pentru a ajunge în locuri inaccesibile pentru restul capetelor, în special în cazul pacienților purtători de proteze. Pentru a folosi capătul Implant Denture, plasați vârful pe partea linguală (dinspre limbă) la un capăt al protezei susținute de implant. Deschiderea vârfului este orientată între țesutul gingival natural și proteză, dirijând apa sub proteză. Glisați încet vârful de-a lungul spațiului dintre țesutul gingival natural și proteză până când ați curățat întreaga lungime a protezei.

5.1 CURĂȚAREA ȘI DEPĂNAREA DUȘULUI BUCAL WATERPIK™

Capătul Plaque Seeker™
Pentru a folosi capătul Plaque Seeker™, plasați vârful aproape de dinți astfel încât perii să atingă ușor dinții. Glisați ușor vârful de-a lungul liniei gingivale, oprindu-vă scurt între dinți pentru a peria ușor și a permite apei să curgă între dinți.

Îndepărtarea depunerilor de apă dură / Curățenie generală
Depunerile de apă dură se pot acumula în aparat, în funcție de conținutul de minerale al apei. Dacă această problemă nu este adresată, ea poate afecta performanța dușului bucal.

Curățarea pieselor interne: adăugați 2 linguri de oțet alb într-un rezervor plin cu apă caldă. Îndreptați mânerul și vârful spre chiuvetă. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când rezervorul este gol. Clătiți repetând procesul cu un rezervor plin cu apă caldă curată. Acest proces trebuie efectuat la fiecare 1 până la 3 luni pentru a asigura o performanță optimă.

Utilizarea apei de gură și a altor soluții
În cazuri excepționale și doar la recomandarea medicului stomatolog, dușul bucal poate fi utilizat cu apă de gură sau soluții antibacteriene. Pentru a vă asigura că nu se anulează garanția produsului, este absolut necesar să urmați pașii de curățare a aparatului după fiecare utilizare a aparatului cu soluțiile respective. După utilizarea oricărei soluții speciale, clătiți unitatea pentru a preveni blocarea, umplând complet rezervorul cu apă caldă și punând aparatul în funcțiune cu capătul îndreptat spre chiuvetă. Repetați procesul de 2-3 ori pentru a vă asigura că aparatul este curat și nu există depuneri ale substanțelor folosite.

Nerespectarea acestui pas atrage anularea garanției. Utilizarea unor soluții insolubile în apă atrage anularea garanției.

5.2 CURĂȚAREA ȘI DEPĂNAREA DUȘULUI BUCAL WATERPIK™

Curățare
Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare/incărcător. Curățați produsul când este necesar folosind o cârpă moale și un detergent neabraziv. Rezervorul de apă este detașabil pentru o curățare ușoară. Acesta poate fi curățat și în mașina de spălat vase, dacă este plasat în raftul superior al acesteia. Se recomandă uscarea la aer în locul unui ciclu de încălzire.

Îndepărtarea depozitelor de apă dură / curățare generală
Depozitele de apă dură se pot acumula în unitatea dumneavoastră, în funcție de conținutul mineral al apei. Dacă sunt lăsate necontrolate, pot afecta performanța dușului bucal. Pentru curățarea părților interne: adăugați 2 linguri de oțet alb într-un rezervor plin de apă caldă. Îndreptați mânerul și vârful spre chiuvetă. Porniți unitatea și rulați până când rezervorul este gol. Clătiți prin repetare cu un rezervor plin de apă caldă, curată. Acest proces ar trebui realizat la fiecare 1 până la 3 luni pentru a asigura performanța optimă.

Scurgeri
Dacă apar scurgeri din cauza unui furtun deteriorat, furtunurile și mânerele de schimb pot fi achiziționate la www.dentamericadistribution.ro și la numărul de telefon: 0769 059 907.

6. ÎNDEPĂRTAREA, ELIMINAREA/REICLAREA BATERIEI

Înlăturarea Bateriei
Bateria litiu-ion reincărcabilă din interiorul acestui produs nu poate fi înlocuită și trebuie îndepărtată la sfârșitul vieții acestuia, înainte de reciclare. Acest proces nu este reversibil și anulează garanția aparatului. Respectați măsurile de siguranță de bază atunci când urmați procedura de mai jos.

Asigurați-vă că vă protejați ochii, mâinile, degetele și suprafața pe care lucrați. Descărcați bateria până când unitatea nu mai funcționează înainte de a scoate bateria.

1. Întoarceți unitatea. Îndepărtați eticheta produsului (doar pentru modelul WF-12).

2. Îndepărtați cele 4 piciorușe de cauciuc prin ridicarea lor cu grijă cu o șurubelniță mică cu cap plat.

3. Îndepărtați cele 5 șuruburi din zonele indicate cu o șurubelniță mică.

4. Puneți unitatea în poziție verticală și scoateți rezervorul și capacul rezervorului.

5. Îndepărtați carcasa superioară prin tragerea acesteia în sus, conform indicațiilor.

6. Îndepărtați șuruburile din zonele indicate cu o șurubelniță mică.

7. Puneți deoparte ansamblul plăcii de circuit. Îndepărtați cele 4 șuruburi din zonele indicate cu o șurubelniță mică.

8. Ridicați capacul bateriei conform indicațiilor.

9. Scoateți bateria din carcasă.

10. Taiati firul negru al bateriei cu o foarfecă sau un clește lateral, apoi tăiați firul roșu al bateriei.

NOTĂ: NU TĂIAȚI AMBELE FIRE ALE BATERIEI ÎN ACELAȘI TIMP.

11. Vă rugăm să reciclați unitatea și bateria în conformitate cu cerințele locale sau de stat.

7.1 INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Service
Dușurile bucale Waterpik® nu conțin componente electrice care pot fi reparate de către consumator și nu necesită întreținere de rutină. Pentru toate nevoile dumneavoastră de service, accesați www.dentamericadistribution.ro. De asemenea, puteți suna la numărul de asistență pentru clienți la +40 769 059 907. Pentru eficiență, este util să aveți la îndemână numerele de serie și de model.

Aceste numere se află pe partea inferioară a unității. Încă aveți întrebări? Accesați www.waterpik.com. Pentru întrebări sau probleme, vă rugăm să sunați la centrul de asistență pentru clienți înainte de a returna produsul. Vă rugăm să nu trimiteți unitatea la adresa Water Pik, Inc., deoarece acest lucru poate cauza întârzieri lungi. Este util să țineți cont și să comunicați numerele de serie și de model în toată corespondența. Water Pik, Inc. garantează pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției cumpărătorului inițial al acestui produs nu faptul că aparatul nu prezintă defecte materiale și de fabricație. Consumatorul va fi obligat să prezinte bonul fiscal original ca dovadă a datei achiziției și, dacă este solicitat, întregul produs pentru a susține o cerere de garanție. Produsul va fi înlocuit cu condiția ca acesta să nu fi fost utilizat în mod abuziv sau greșit, să nu fi fost modificat sau deteriorat după cumpărare, să fi fost utilizat conform instrucțiunilor și să fi fost utilizat numai cu accesoriu sau piese consumabile aprobate de Water Pik, Inc. Această garanție limitată exclude accesoriile sau piesele consumabile, cum ar fi capetele, bateriile etc.

Accesoriile de înlocuire pot fi achiziționate online de pe site-ul www.dentamericadistribution.ro, sau telefonic la +40 769 059 907.

7.2 INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Instalarea este responsabilitatea consumatorului și nu este acoperită de garanție. Această garanție limitată exclude accesoriile sau piesele consumabile, cum ar fi capetele de curățare etc. Utilizarea cu o tensiune necorespunzătoare sau cu alte lichide în afară de apă caldă va deteriora produsul și va ANULA garanția.

Avertizare: modificările sau schimbările neaprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Atenție! Folosirea oricărui alt lichid fără respectarea instrucțiunilor duce automat la pierderea garanției! Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are următoarele obligații:

- Să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;
- Să păstreze produsul în bune condiții;
- Să utilizeze produsul doar cu apă, conform instrucțiunilor. **Folosirea necorespunzătoare a altor lichide atrage pierderea garanției.**

waterpik

Water Pik, Inc., a subsidiary of Church & Dwight Co., Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA 1-800-525-2774
www.waterpik.com
www.dentamericadistribution.ro