

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE


Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
Când utilizați produse electrice, în special în prezența copiilor, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază:

ATENȚIE!

- Pentru a reduce riscul de electrocutare:**
- Deconectați întotdeauna produsul de la priză după utilizare.
 - Nu manipulați ștecherul sau încărcătorul cu mâinile ude.
 - Nu îl introduceți sau lăsați să cadă în apă sau alt lichid.
 - Nu utilizați în timpul băii.
 - Nu așezați sau depozitați produsul într-un loc din care poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.
 - Nu încercați să recuperați un aparat care a căzut în apă.
 - Deconectați-l imediat de la priză.
 - Verificați cablul de alimentare pentru eventuale deteriorări înainte de prima utilizare și pe întreaga durată de viață a produsului.

Instrucțiuni de utilizare

Waterpik®
ULTRA
ULTRAWP WF-112EU COUNTERTOP BLACK 4PK
WP WF-100EU ULTRA COUNTERTOP WHITE 4PK

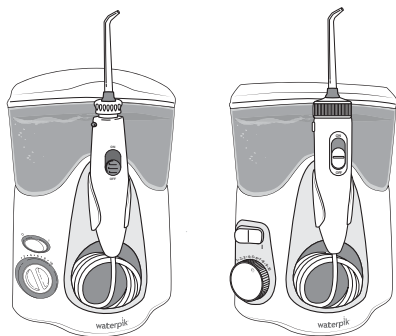

1

ATENȚIE!

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau vătămare corporală:

- Nu conectați acest dispozitiv la un sistem de tensiune diferit de cel specificat pe dispozitiv sau încărcător.
- NOTĂ: Utilizarea cu tensiune necorespunzătoare va deteriora produsul și VA ANULA garanția.
- Dacă produsul este desfăcut/dezasamblat DIN ORICE motiv, garanția va fi anulată.
- Nu utilizați acest produs dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost scăpat sau deteriorat, ori dacă a fost scăpat în vreun lichid.
- Nu direcționați jetul de apă sub limbă, în ureche, nas sau alte zone delicate. Acest aparat este capabil să producă presiuni care pot provoca daune serioase în aceste zone. Amoeba potențial mortală, Naegleria Fowleri, poate fi prezentă în unele ape de la robinet sau în apa de fântână neclorinată și poate fi fatală dacă este direcționată în nas sau urechi.
- Utilizați acest produs doar conform instrucțiunilor sau recomandărilor medicului stomatolog.

2

- Utilizați doar capetele și accesoriile recomandate de Water Pik, Inc.
- Nu introduceți sau lăsați să pătrundă obiecte străine în orice deschidere sau furtun.
- Țineți cablul electric departe de suprafețele fierbinți.
- Nu folosiți în aer liber sau în locurile unde se utilizează produse cu aerosol (spray) sau unde se administrează oxigen.
- Nu folosiți iod sau uleiuri esențiale concentrate insolubile în apă în rezervorul acestui produs. Utilizarea acestora poate reduce performanța și va scurta durata de viață a produsului. Folosirea acestor produse poate anula garanția.
- Umpleți rezervorul doar cu apă caldută sau cu soluții recomandate de medicul stomatolog.
- Îndepărtați orice bijuterie orală sau dentară înainte de utilizarea acestui produs.
- Nu utilizați aparatul dacă aveți o rană deschisă pe limbă sau oriunde altundeva în cavitatea orală.
- Dacă urmați un tratament cu antibiotice, în special antibiotice înainte de proceduri stomatologice, trebuie să consultați stomatologul înainte de a utiliza acest aparat sau orice alt dispozitiv de igienă orală.

3


- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Dacă vârful Pik Pocket™ (nu este inclus în toate modelele) se separă de tija de susținere din orice motiv, aruncați atât vârful, cât și tija, și înlocuiți-le cu un nou vârf Pik Pocket™.
- Nu utilizați acest produs pentru mai mult de 5 minute la fiecare interval de două ore.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Ca măsură de siguranță, acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată într-un singur sens. Dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, inversați-l. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu încercați să modificați ștecherul în niciun fel.

NOTĂ: Unitatea se va opri automat după 5 minute de utilizare continuă.

NU ARUNCAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

4

1. Capacul rezervorului cu zona de depozitare a capetelor
2. Butonul de evacuare a capetelor
3. Valva rezervorului
4. PORNIRE/OPRIRE
5. Butonul rotativ de presiune
6. Capătul de utilizare
7. Buton rotativ pentru controlul direcției de rotație
8. Rezervorul
9. Butonul de evacuare a apei ON/OFF
10. Mânerul
11. Baza

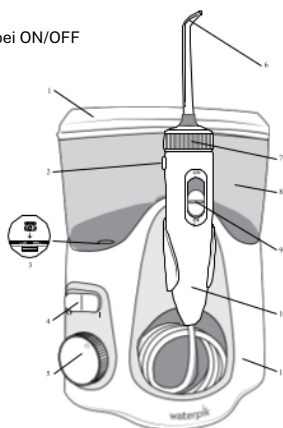

5

CAPETE DE UTILIZARE (NU TOATE CAPETELE SUNT INCLUSE LA TOATE MODELELE):


- A. Capătul Ortodontic***
Aparat dentar/Utilizare generală
- B. Capătul Pik Pocket™****
Pungi parodontale/Leziuni de furcație
- C. Capătul Plaque Seeker™****
Implanturi/Coroane/Punți/Retinere
- D. Capătul periută de dinți***
Utilizare generală
- E. Capătul Precision (Classic Jet)****
Utilizare generală
- F. Capătul curățător pentru limbă****
Curățarea limbii pentru o respirație proaspătă




- *Înlocuiți la fiecare 3 luni
- **Înlocuiți la fiecare 6 luni

Accesoriile de înlocuire pot fi achiziționate online de pe www.dentamericadistribution.ro, sau telefonic la +40 769 059 907. Pentru a găsi informații detaliate despre capete, alte accesorii și utilizarea produsului, vă rugăm să apelați numărul de telefon menționat sau să vizitați site-ul www.dentamericadistribution.ro.


6

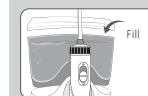

Pornirea dispozitivului
Introduceți cablul într-o priză electrică. Dacă priza este controlată de un întrerupător, asigurați-vă că acesta este pornit.

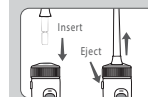

Pregătirea rezervorului
Ridicați capacul rezervorului, scoateți rezervorul și umpleți-l cu apă caldută. Așezați rezervorul la loc pe bază, apăsați ferm și închideți capacul.

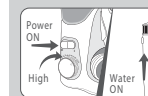

Inserearea și scoaterea capetelor
Introduceți capătul în centrul mânerului dușului bucal, apăsând ferm până când capătul face clic și se fixează în poziție. Inelul colorat va fi la același nivel cu partea superioară a mânerului dacă capătul este fixat corect. Pentru a scoate capătul din mâner, apăsați butonul de eliberare aflat pe mâner.



Înainte de prima utilizare
Setați butonul de control al presiunii de pe bază la nivelul maxim (setarea de presiune nr. 10). Îndreptați mânerul și capătul către chiuvetă. Porniți aparatul și apa până când rezervorul este golit. Opriți aparatul.

7

3.3 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII



Modificarea treptei de presiune

Setați butonul de control al presiunii de pe bază la nivelul cel mai scăzut (setarea de presiune nr. 1) pentru prima utilizare. Creșteți treptat presiunea în timp, până la nivelul preferat – sau conform indicațiilor medicului stomatolog.

Utilizarea dușului bucal Waterpik

Întotdeauna introduceți capătul în cavitatea orală înainte de a porni apa. Cu comutatorul de apă de pe mâner în poziția OFF, porniți aparatul.

Aplecați-vă deasupra chiuvetei și închideți ușor buzele, suficient cât să preveniți stropirea, dar să permiteți apei să curgă din gură în chiuvetă. Porniți comutatorul de apă. La final, opriți comutatorul de apă și aparatul. În timpul utilizării puteți opri fluxul de apă glisând comutatorul de apă de pe mâner în poziția OFF.


NOTĂ: Motorul va continua să funcționeze chiar dacă opriți fluxul de apă de pe mâner.

Tehnica recomandată

Pentru rezultate optime, începeți cu dinții din spate și îndreptați-vă spre dinții din față. Direcționați jetul la un unghi de 90 de grade față de linia gingivală, cu capătul introdus în cavitatea orală. Glisați capătul de-a lungul liniei gingivale și faceți o scurtă pauză între fiecare doi dinți. Continuați până când ați curățat partea interioară și exterioară a dinților atât de sus, cât și de jos.

8

4.1 ACCESORII

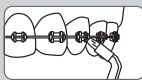

Când ați terminat, opriți aparatul.

Goliți orice lichid rămas în rezervor.

NOTĂ: Dacă ați folosit apă de gură sau altă soluție în afară de apă, consultați secțiunea „Utilizarea apelor de gură și a altor soluții”

INDICAȚIILE CAPETELOR

Capătul Pik Pocket™

Capătul Pik Pocket™ este special conceput pentru a trimite apa sau soluțiile antibacteriene adânc în pungile parodontale. Pentru a utiliza capătul Pik Pocket™, setați unitatea la cea mai mică treaptă de presiune. Plasați capătul soft la un unghi de 45 de grade față de dinte și introduceți vârful sub marginea gingiei, în punga parodontală.

Capătul ortodontic

Pentru a utiliza capătul ortodontic, glisați-l ușor de-a lungul marginii gingiei, oprindu-vă scurt pentru a peria ușor zona interdentară și cea din jurul bracketului ortodontic, apoi continuați și repetați mișcarea la următorul dinte.

9

4.2 ACCESORII



Capătul pentru curățarea limbii

Setați unitatea la cea mai mică treaptă de presiune, plasați capătul în centrul limbii, aproximativ la jumătatea acesteia. Trageți înspre vârful limbii, aplicând o presiune ușoară. Creșteți presiunea după preferință.

Capătul Plaque Seeker™

Pentru a folosi Capătul Plaque Seeker™, poziționați-l aproape de dinți astfel încât perii să atingă ușor dinții. Glisați ușor vârful de-a lungul liniei gingivale, făcând pauze scurte între dinți pentru a permite apei să curețe și spațiile interdentare.

Capătul periută de dinți

Puneți capătul în cavitatea orală, cu periūta pe dinte la marginea gingiei. Vârful periūtei poate fi folosit cu sau fără pastă de dinți. Aplicând o presiune ușoară (perii nu trebuie să se îndoaie), masați cu periūta înainte și înapoi cu mișcări foarte scurte, circulare – asemănător cu utilizarea unei periūte manuale.

10

11.

5.1 CURĂȚAREA ȘI DEPĂNAREA DUȘULUI BUCAL WATERPIK®



Utilizarea apelor de gură și a altor soluții

În cazuri excepționale și doar la recomandarea medicului stomatolog, dușul bucal poate fi utilizat cu apă de gură sau soluții antibacteriene. Pentru a vă asigura că nu se anulează garanția produsului, este absolut necesar să urmați pașii de curățare a aparatului după fiecare utilizare a aparatului cu soluțiile respective. După utilizarea oricărei soluții speciale, clătiți aparatul pentru a preveni înfundarea, umplând complet rezervorul cu apă caldă și punând aparatul în funcțiune cu capătul îndreptat spre chiuvetă. Repetați procesul de 2-3 ori pentru a vă asigura că aparatul este curat și nu există depuneri ale substanțelor folosite. Nerespectarea acestui pas atrage anularea garanției. Utilizarea unor soluții insolubile în apă atrage anularea garanției.


Curățarea

Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză. Curățați produsul atunci când este necesar, folosind o cârpă moale și un detergent delicat, neabraziv.

Rezervorul de apă este detașabil pentru o curățare ușoară și poate fi spălat în siguranță pe raftul superior al mașinii de spălat vase. Se recomandă uscarea la aer în loc de uscarea cu ciclul de încălzire al mașinii de spălat vase.

11

5.2 CURĂȚARE, MENTENANȚĂ

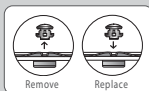

NOTĂ: Scoateți supapa rezervorului prin apăsarea în sus din partea de jos a rezervorului, înainte de a pune rezervorul în mașina de spălat vase!

Îndepărtarea depozitelor de calcar/curățare generală

Depunerile de calcar se pot acumula în aparat, în funcție de conținutul mineral al apei utilizate. Dacă nu sunt îndepărtate, acestea pot afecta performanța aparatului.

Curățarea părților interne:

Adăugați 2 linguri de oțet alb într-un rezervor plin cu apă caldă. Îndreptați mânerul și capătul către chiuvetă. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când rezervorul se golește. Clătiți prin repetarea procesului cu un rezervor plin cu apă caldă curată.

Acest proces ar trebui efectuat la fiecare 1-3 luni pentru a asigura o performanță optimă.

12

5.3 CURĂȚARE, MENTENANȚĂ

Scurgeri

Dacă există scurgeri cauzate de un furtun deteriorat, furtunuri și mânere de înlocuire pot fi achiziționate de pe www.dentamericadistribution.ro. Dacă scurgerea provine din rezervor, asigurați-vă că supapa este poziționată corect.

Dușurile bucale Waterpik® nu conțin componente electrice care pot fi reparate de către consumator și nu necesită întreținere de rutină. Pentru toate nevoile dumneavoastră de service, accesați www.dentamericadistribution.ro. De asemenea, puteți suna la numărul de asistență pentru clienți la +40 769 059 907. Pentru eficiență, consultați numerele de serie și de model în toată corespondența. Aceste numere se află pe partea inferioară a unității.

13

6. GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI ANI

Water Pik, Inc. oferă consumatorului original garanția că acest produs este liber de defecte de materiale și execuție pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției.

Consumatorul va trebui să prezinte bonul fiscal original ca dovadă a datei achiziției și, dacă i se solicită, întreg produsul pentru a susține o cerere de garanție. Water Pik, Inc. va înlocui produsul, la propria discreție, cu condiția ca produsul să nu fi fost abuzat, utilizat necorespunzător, modificat sau deteriorat după achiziție, să fi fost folosit conform instrucțiunilor și doar cu accesorii sau piese consumabile aprobate de Water Pik, Inc. Această garanție limitată exclude accesoriiile sau piesele consumabile, cum ar fi capetele, etc. **Utilizarea la o tensiune necorespunzătoare va deteriora produsul și va ANULA garanția.**

Atenție: Acest produs se folosește exclusiv cu apă. Folosirea oricărui alt lichid duce automat la pierderea garanției!

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are următoarele obligații:

-Să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;

-Să păstreze produsul în bune condiții;

-Să utilizeze produsul doar cu apă, conform instrucțiunilor.

Folosirea necorespunzătoare a altor lichide atrage pierderea garanției.

14

waterpik

Water Pik, Inc., a subsidiary of Church & Dwight Co., Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA 1-800-525-2774
www.waterpik.com
www.dentamericadistribution.ro